


Extensible curved suction

エクステンシブルカーブドサククション 経鼻内視鏡用吸引管


送水機能、シャフト脱着機能、
ハンドル回転機能、内筒チューブ
曲がった状態での出し入れ機能、
柔軟性、安全性を
兼ね備えた吸引管

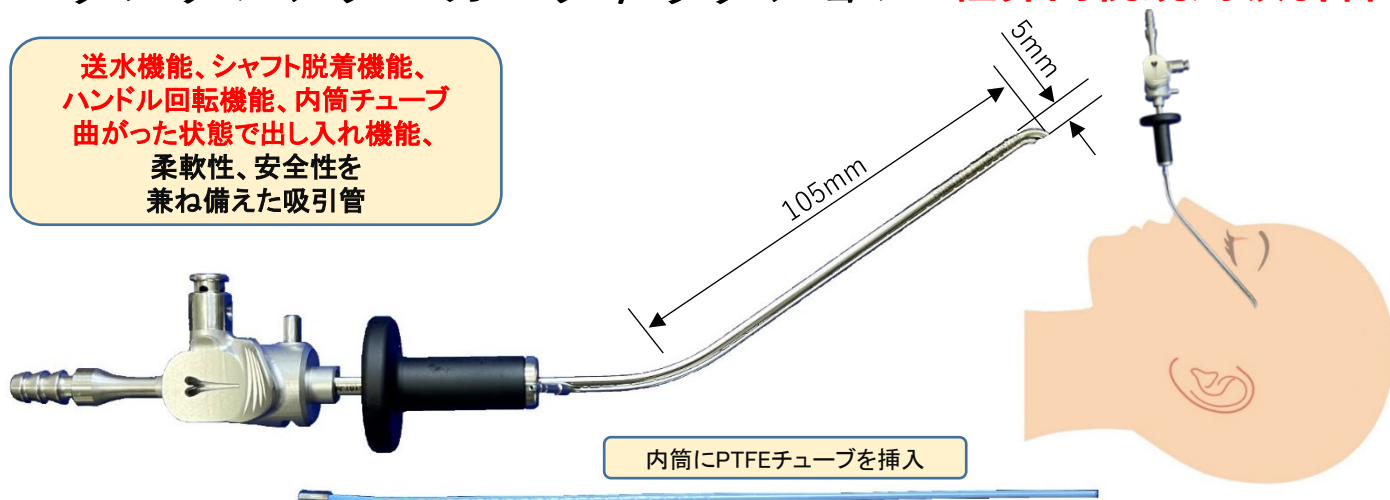


通常の状態



手元のハンドル操作により先端可動。
深部の術野で十分な操作性と広い範囲の吸引が可能。

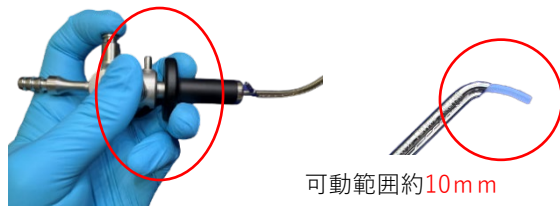


黒いハンドルを回転させると、吸引パイプが、
左右に回転する為、持ちやすい位置に調整。

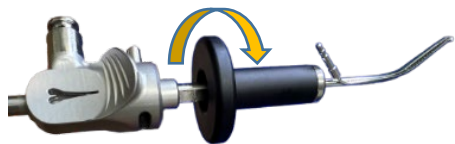

製品特長

今までにないパイプ形状と内筒チューブの組み合わせ
による機器の入れ替え回数の減少、手術時間の短縮と
低侵襲で安全を担保。

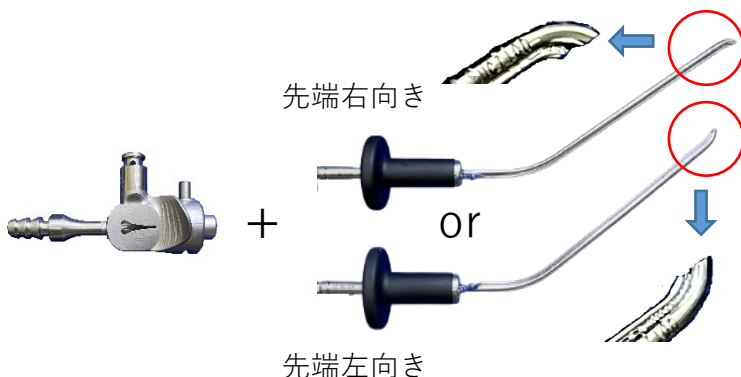

品名	内容・型式	
エクステンシブルカーブドサククション	セット販売 (ハンドル+シャフト+チューブ1本)	エクステンシブルカーブドサククション Lセット ・HS-NKY-L-SET エクステンシブルカーブドサククション Rセット ・HS-NKY-R-SET
	個別販売 (本体部分)	ハンドル部 ・HS-KNYHANDLE01 シャフト部 ・HS-NKYSHAFT01-R(右向き) ・HS-NKYSHAFT01-L(左向き)
	消耗品 (チューブ)	内筒チューブ (5本セット販売) ・HS-NKYTUBE208(5)

製造販売元

ハリキ精工株式会社

〒708-1514 岡山県久米郡美咲町藤田上111番地
TEL 0868-64-7007 FAX 0868-64-7010
URL <https://www.hariki.co.jp/>

Providing safe medical devices
安全な医療機器を提供する。

第2種医療機器製造販売業許可 33B2X10003
製品届出番号 33B2X10003HS0010